

## ***Tarjeta de garantía***

Denominación del modelo: Mobifit Pro

Número del modelo:

Número de serie:\*

\* (debe anotarlo el comercio especializado)

**Distribuidor:**

Fecha y sello

***Movilidad B&B Iberia S.L.***

P.I. Can Mascaró, C/Ponent, Nave 1-A


E-08756 La Palma de Cervelló

[www.bbiberia.es](http://www.bbiberia.es)

Manual de instrucciones  
**Mobifit Pro**  
Pedalier eléctrico



Enjoy mobility.

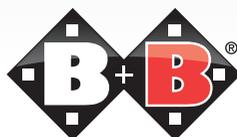



## **1. Información Importante de Seguridad**

Si utiliza un aparato eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar.

**Peligro** – para reducir el riesgo de descargas eléctricas desconecte la red de la unidad siempre inmediatamente después de su uso y antes de limpiarlo.

**Advertencia** – para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, cortocircuito o reducir los daños personales:

1. No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica. Desenchúfelo cuando no esté en uso, incluso si va a sustituir los accesorios.
2. No lo use debajo de una manta o una almohada. El calor excesivo puede provocar un incendio, un cortocircuito o lesiones personales.
3. La supervisión de un adulto es necesaria si el dispositivo se halla cerca de menores de edad, enfermos o discapacitados.
4. Utilice el dispositivo sólo para su uso, tal como se describe en esta guía. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

5. No utilice este aparato si el cable o el enchufe está dañado. Si no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o caído al agua, por favor llévelo a su servicio al cliente para el control y la reparación.
6. No utilice el cable como asa.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. No utilice el aparato si las aberturas de ventilación están bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusa, pelo, etc.
9. No deje caer ni introduzca objetos en los orificios.
10. No usar al aire libre.
11. No utilice el dispositivo en las proximidades de aerosoles o el uso de oxígeno.
12. Para desconectar, coloque todos los interruptores en posición apagado y saque la clavija del enchufe.
13. Mantenga alejados a los niños de los pedales en funcionamiento.





## **2. control remoto**

### **Interruptor principal**

El interruptor principal se encuentra en el mando de control remoto. Cuando el interruptor está en la posición "0" el equipo está apagado. Para encender el Mobifit Pro, sitúe el interruptor en la posición "1". El interruptor indicará el funcionamiento en color rojo.

### **botón Power**

Con el interruptor principal encendido, presione el botón "Power" y se iluminará la pantalla LCD. En ese momento todas las teclas de función están listas para su uso.

### **Modo**

Con el botón "Modo" puede seleccionar entre los distintos programas preestablecidos de entrenamiento. Los modos disponibles son los siguientes:

Modo 0: Modo Manual, tiempo, velocidad y dirección pueden ajustarse de acuerdo con las preferencias individuales.

Modo 1: Modo automático (km/h), la velocidad varía entre 3-4-3-4-3-4.

Modo 2: Modo automático (km/h), la velocidad varía entre 3-4-5-4-3-5.

Modo 3: Modo automático (km/h), la velocidad varía entre 3-4-5-6-5-4.

Modo 4: Modo automático (km/h), la velocidad varía entre 4-5-6-5-4-3.

Modo 5: Modo automático (km/h), la velocidad varía entre 4-3-4-5-6-5.

### **Velocidad**

Modo 0: Modo manual. Pulse el botón "+" para acelerar o "-" para reducir la velocidad. Las velocidades disponibles son de 3 km/h, 4 km/h, 5 km/h hasta 6 km/h.

**Tiempo**

Modo 0: modo manual. Pulse el botón "+" para aumentar el tiempo de ejercicio o "-" para reducirlo. Puede establecer un tiempo mínimo de ejercicio entre 3, 6, 9 o 12 minutos.

**Cambio de sentido**


Con el dispositivo encendido y funcionando, pulse el botón "reverso" para cambiar la dirección del motor.





### 3. Montaje

Apriete los tornillos (D) con las arandelas (E) utilizando la herramienta (F) con firmeza. Luego atornille los pedales (C) también utilizando una herramienta (F) apretar y bloquear con los tornillos (G). Asegúrese de montar los pedales en el lado correcto (D/I).

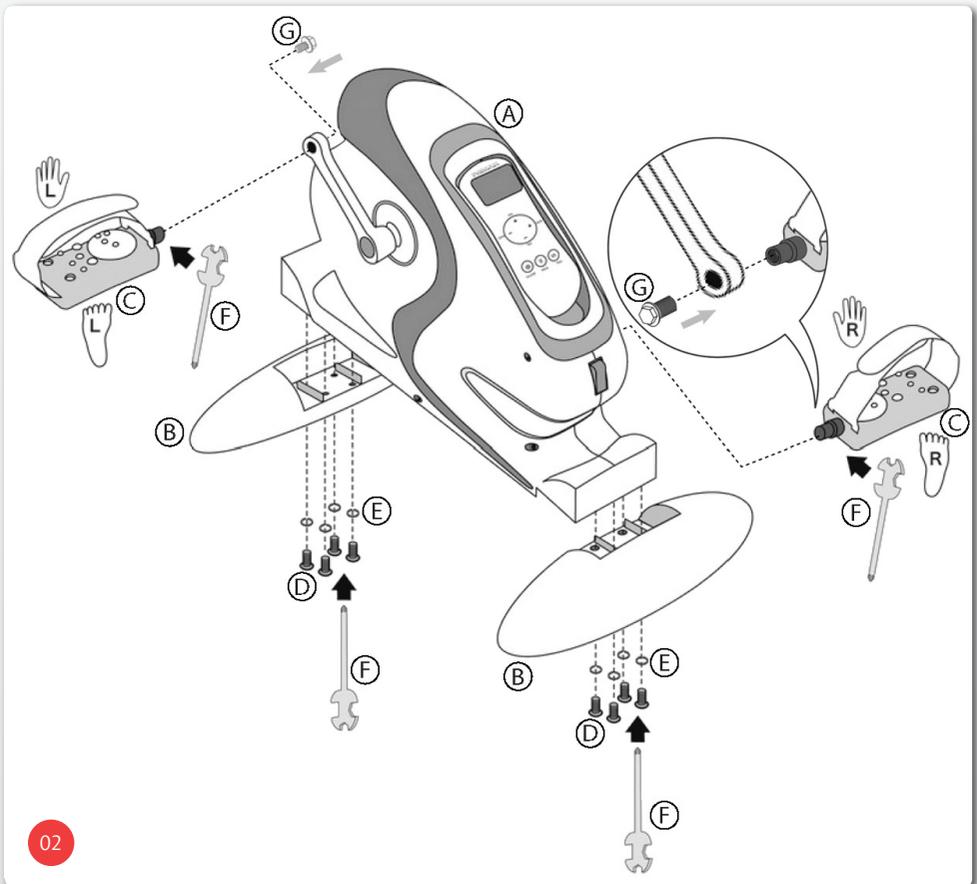

## 4. Función Autoprotección

El interruptor principal se encuentra en el mando de control remoto. Cuando el interruptor está en la posición "0" el equipo está apagado. Para encender el Mobifit Pro, sitúe el interruptor en la posición "I". El interruptor indicará el funcionamiento en color rojo.



03



Si el dispositivo no se usa, se apaga automáticamente después de 60 segundos. Se puede reiniciar la unidad pulsando el botón "Power".



Las personas con trastornos musculares, problemas de corazón u otros problemas de salud, deben consultar con su médico antes de usar.



Carga máxima hasta 100kg.

## 5. 5. Información adicional

Fuente de alimentación:	AC220V – 50Hz
Potencia :	40 W
Motor:	AC220V – 50Hz
Peso:	5,5 kg
Dimensiones:	410 x 290 x 480 mm