

SILLA DE DUCHA APEX 0402014NA

Español

Introducción

Nuestra silla de ducha está fabricada con tubería de aluminio pintada y está compuesta por reposapiés desmontables y plegables y reposabrazos abatibles. El respaldo de la silla incorpora una barra para que el asistente (siempre que sea necesario) pueda manejar la silla. Su asiento, provisto de un hueco inferior, permite utilizar la silla como inodoro, o bien como pedestal para WC.



842

Montaje

El producto se entrega con el respaldo y los reposapiés desmontados (véase el gráfico 1). El respaldo se monta fácilmente a la estructura de base y se fija en su posición apretando los pomos manualmente (gráfico 2).



Gráfico 2

Gráfico 1

Reposapiés plegables

Los reposapiés pueden plegarse mediante un giro, o bien desmontarse totalmente para facilitar el acceso a la silla.

Levante la palanca de bloqueo para desbloquear el mecanismo de retención (gráfico 3), levante los reposapiés para desmontarlos o para girarlos hacia atrás.

Cuando se vuelvan a poner los reposapiés hacia delante, éstos quedarán enganchados y bloqueados en su posición cuando se escuche un chasquido.

Para ajustar la altura de los reposapiés retire el tornillo de ajuste de altura utilizando la llave hexagonal que se facilita. Ajuste la placa de los reposapiés en la posición deseada, vuelva a colocar el tornillo en el agujero más próximo y apriételo bien.

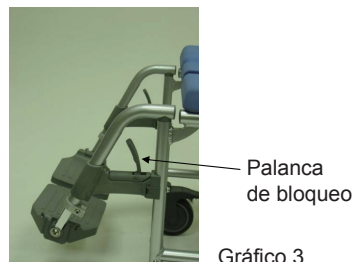


Gráfico 3

Reposabrazos

Los reposabrazos pueden levantarse y ponerse en vertical si se desea hacer un desplazamiento lateral (gráfico 4).



Gráfico 4

Instrucciones de manejo

La silla móvil para ducha APEX 0402014NA viene equipada con cuatro ruedas de 125 mm y está diseñada para permitir al asistente posicionar libremente al usuario. Cuando se esté utilizando, la silla puede ser inmovilizada bloqueando los frenos de las ruedas presionando sobre las palancas colocadas en ellas. Para desbloquearlas, presione hacia arriba la palanca.

La silla de aluminio está equipada con su orinal. Este puede retirarse desde la parte posterior de la silla cuando se encuentre en la ducha o se esté utilizando para WC de pedestal. Al volver a colocar el orinal, asegúrese de que este se asiente en ambos carriles laterales situados debajo de la silla y que esté en su posición central.

Indicaciones de seguridad

No se ponga de pie sobre los reposapiés cuando vaya a salir de la silla, ya que provocaría que la silla volcara hacia adelante.

Ponga siempre los frenos cuando vaya a utilizar la silla para ducharse o para hacer sus necesidades. De esta manera evitará cualquier tipo de movimiento innecesario.

Recuerde que en las proximidades de las duchas los suelos suelen estar húmedos y resbaladizos. Sea consciente de que si el usuario se apoya muy adelantado en la silla y retira su peso de las ruedas posteriores, la silla podría deslizarse hacia atrás, incluso estando el freno puesto.

No se sienta en el extremo delantero del asiento, ya que podría hacer que la silla venciera hacia delante. Mantenga una postura vertical y apóyese contra el respaldo.

ATENCIÓN: Tenga un cuidado especial cuando se sienta o se levanta de esta silla de ducha.

Limpieza

Para limpiarla, utilice un paño suave y húmedo. Utilice un detergente neutro de uso general y agua templada. La silla para ducha puede colocarse debajo del agua a baja presión, incluso se puede rociar directamente con el mango de la ducha para su limpieza. No utilice abrasivos fuertes ni limpiadores que contengan lejía para evitar daños superficiales o su decoloración.

Para desinfectarla, límpiela como se indica anteriormente y aclárela con un desinfectante que tenga un contenido de cloro, aclárela y séquela bien.

Mantenimiento

Todos los días, antes de usarla, compruebe que funcionen bien los frenos y las ruedas.

Asegúrese de que las ruedas giran libremente.

Compruebe que el asiento esté bien sujeto con los enganches delanteros.

Cerciórese de que los dos reposabrazos están bloqueados en altura.

Compruebe que los reposapiés y las placas para los pies están bien sujetos.

Especificación

Peso máximo del usuario – 125 kg.

Información sobre la garantía

Esta silla para ducha tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra, en caso de defecto de fabricación. Póngase en contacto con su proveedor / distribuidor si observara algún defecto.

La garantía no se extiende a los costes resultantes de la reparación de averías, como los portes o gastos de viaje, costes, etc.

El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por los daños físicos o personales derivados del mal uso o de la no-observación de las instrucciones indicadas anteriormente.

0402014NA SHOWER CHAIRS

English

Introduction

The Days Healthcare 841 and 842 range of Shower Chairs are manufactured from powder coated aluminium tubing with swing-away detachable footrests and lift up arms. The back support incorporates a pushing handle for attendant use when required. A gap fronted seat allows the chairs to be used as a commode or over a toilet pedestal.



842

Assembly

The product is shipped from Days Healthcare Ltd with the back assembly and footrests detached, see (fig 1). The backrest is easily fitted into the base tube and is secured in place by tightening up the hand knobs (fig 2)



Fig 2

Fig 1

Swing-away footrests

The footrests can be rotated away from the front of the chair or removed completely to aid access to the chair. Depress the plastic locking lever to release holding mechanism (fig 3), lift to remove or rotate footrests to the rear.

The footrest will click to lock when returned to the front of the chair. Fig 3

To adjust the footplate height, remove the height adjustment screw with the hexagon key provided, adjust the footplate to the required position and refit Locking Lever screw into the nearest hole and tighten to secure.

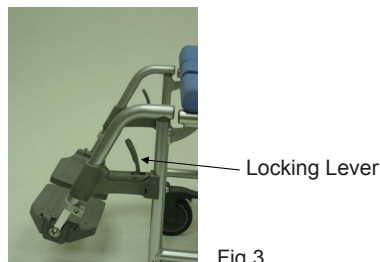


Fig 3

Armrests

The armrests can be lift upright for side transfer (Fig 4).



Fig 4

Operating Instructions

The 842 Mobile Shower Chair is fitted with four 125mm castors and is designed for the user to be positioned by an attendant. When in use the chair can be secured by locking the brakes on the castors with your foot by pressing down on the castor levers. To release, pull up on the lever.

The 841 model is fitted with 24" rear wheels thus allowing the user to self propel themselves into position. When in use the chair can be secured by pushing the brake levers fully forward to lock the rear wheels. To release, pull the levers back.

The tension of the brake may be adjusted by loosening the brake support bracket and sliding it along the frame. Re-tighten the two clamp bolts after adjustment. Both models are supplied with toileting bowls which can be removed from the rear of the chair when showering or using a pedestal toilet. When refitting the bowl, ensure the bowl is seated in both slides underneath the seat and centrally positioned.

Safety Precautions

Do not stand on the footrests when getting in or out of the chair as this will tip the chair forwards. Always apply the brakes when using the chair for showering or toileting to avoid unnecessary chair movement.

Remember in a shower environment the floors are wet and slippery. Be aware that if the user leans too far forward in the chair and takes the weight off the rear wheels the chair could slide backwards even with the brakes applied.

Do not sit on the front edge of the seat as this will also tend to tip the chair forward. Maintain an upright posture and lean against the backrest.

WARNING!-Always take extra care when getting in or out of the shower chair.

Cleaning

To clean, wipe over with a soft damp cloth. Use general purpose neutral detergent and warm soapy water. The shower chair may be placed under running water at low pressure or showered down to assist cleaning. Do not use harsh abrasives or bleach based cleaners to avoid surface damage and discolouration.

To disinfect clean as above and wipe over with solution of one thousand parts per million available chlorine disinfectant (haztabs/precept), rinse and dry.

Maintenance

Daily, before use, check the effective operation of the brakes and castors. Make sure the castors rotate freely. Check the seat is properly secured in place by the front clips. Both armrests are securely locked in height. Footrests and footplates are secure in position.

Specification

Maximum User Weight – 125kg

Warranty Information

The Days Healthcare Shower Chairs are warranted for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, etc. The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or non-observance of the instructions set out above.