

# CARRO DE LAVADO ALTURA VARIABLE HIDRÁULICO



- **El carro de lavado** (hidráulico) se usa para las transferencia de la cama a la ducha. La persona es transferida en el carro de manera fácil y confortable.
- **La altura variable** de 52 a 88 cm permite al personal que está al cuidado de los pacientes, trabajar en una posición ideal, evitando el riesgo de lumbalgias.
- **Las barandillas laterales** de protección, de 20 cm de altura, garantizan la seguridad del paciente.
- **Para pacientes** de hasta 155 kg.



## Altura variable hidráulica

Estructura en acero acabado epoxi antirrosión.

### Confort:

Colchoneta de poliéster de PVC, color verde caribe, guateado, de 2 cm de espesor, fijado en una plataforma compacta, hidrófuga.

Cojín cilíndrico: altura 9,90 cm, longitud 49,7 cm y anchura 20,2 cm.

### Práctico:

Plano de camilla ligeramente inclinado para una correcta evacuación del agua.

Altura variable hidráulica accionable a través de un pedal bilateral.

Barra de empuje en cabeza y pies.

Cesta porta ropa termoconformada, en cabezal del carro.

Barandillas perfiladas abatibles acabado epoxi.

Desagüe de evacuación obturable.

Manguera de evacuación con clip de sujeción en el lateral del plano de la camilla.


Manguera de evacuación de 185 cm de largo y 4 cm de diámetro.

### Seguridad:

Capó de protección de la base en ABS

Freno centralizado (opcional) de las 4 ruedas, una de ellas direccional.

Altura sobre el suelo de 13 cm (15 cm, con freno centralizado).

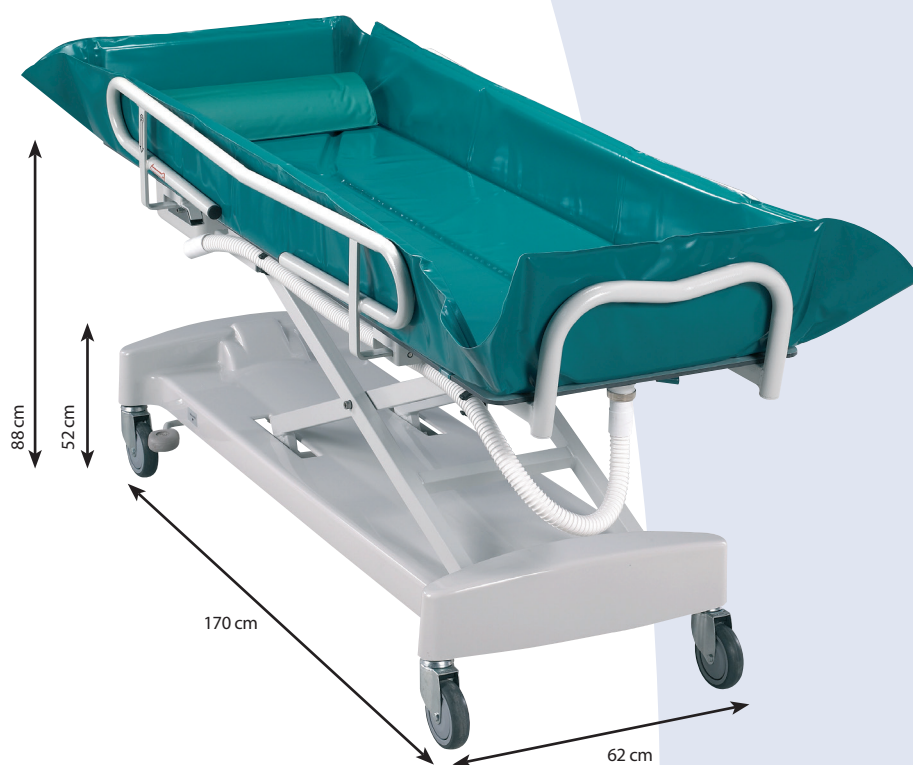

Cesta porta ropa de serie.



Desagüe de evacuación fácil de usar. Plano inclinado a 2°.



Fácil transferencia del paciente gracias a la posición baja de 52cm. Acercando el carro a la cama, la transferencia puede realizarla una sola persona.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	DIMENSIONES	PESO	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS
CARRO DE LAVADO	C4300	74x198 cm Plano de camilla: 178x60cm	85 Kg	170 Kg Paciente: 155 Kg Accesorios: 15 Kg	Ø 100 mm con freno independiente Ø 125 mm con freno centralizado (opcional)
BARANDILLAS		140x20 cm			

Garantía de 2 años\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel.: +34 9 61 56 55 21 – Fax: +34 9 61 56 03 83 – E-mail: ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

Fabricado por

**MÉDICATLANTIC**  
WINNCARE

