



ATTITUDE JUNIOR

DONDE LA AVENTURA COMIENZA

LA MEJOR COMPAÑERA DE TRAVESURAS

LA PRIMERA HANDBIKE PARA DESCUBRIR NUEVOS HORIZONTES

Los peques más ávidos de aventuras encontrarán en la Attitude Junior su aliada perfecta. De su mano podrán dar rienda suelta a su necesidad de descubrir el mundo que los rodea. Y es que la Handbike Attitude Junior no sólo les permite disfrutar de una mayor libertad y autonomía, sino que también les ofrece total seguridad y confort para llegar más lejos.

// Quickie Attitude Junior
con Zippie Youngster 3

ATTITUDE

Junior

Manual

EL HANDBIKE ES UN DEPORTE IDEAL PARA NIÑOS

- Forma parte de su desarrollo natural durante la etapa de crecimiento
- Favorece la autoestima al promover la independencia e integración con otros niños
- Favorece la coordinación y el control corporal
- Ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular




1, 2, 3... ¡ LISTA!

Acoplar la handbike Attitude a la silla de ruedas ¡es cosa de niños! Su sencillo sistema de anclajes de 4 puntos permite colocarla en cuestión de segundos... ¡y desmontarla con la misma rapidez! La solución ideal para exploradores que no tienen tiempo que perder en su día a día.
¡Y sin pesados anclajes en la silla!



Una vez retirada la handbike sólo dos pequeños anclajes (170 g) permanecen en la parte frontal de la silla.

Los anclajes de la handbike Attitude Junior se acoplan fácilmente a la parte frontal de la silla, sin la necesidad de piezas adicionales o cableados que molesten al niño en las rodillas.

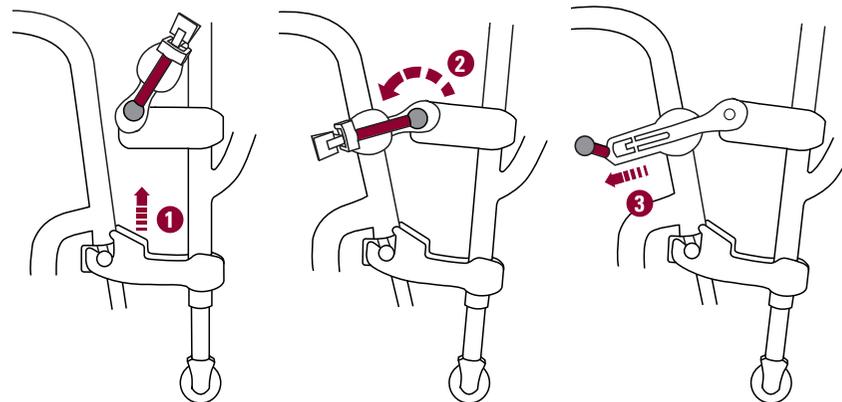

- 1 Conecta los anclajes de tu silla a la handbike.
- 2 Desliza hacia abajo la abrazadera superior.
- 3 Bloquea la posición accionando la palanca de color rojo.



→ Comprueba en este vídeo lo fácil que es el montaje!



CRECIENDO JUNTOS

El ajuste sencillo de la profundidad (hasta 10 cm) y del ángulo (de 0 a 28°) de la horquilla garantiza una posición ergonómica de las bielas. Así el niño podrá disfrutar de una postura más correcta, lo que se traduce en una mayor eficiencia en la conducción y un mejor aprovechamiento de la energía, además de ser una característica fundamental para adaptarse a su crecimiento.



10 cm

28°

COMIENZA LA AVENTURA

La handbike Attitude Junior incorpora una serie de características especiales que harán que tu hijo pueda manejarla con total control, confianza y comodidad: rueda delantera de 16", cambio integrado de 8 velocidades, empuñaduras horizontales...

Conducción excepcional garantizada en todos los terrenos y con un control suave de la velocidad gracias al freno contrapedal.

Ligera, y muy fácil de manejar, ¡siempre lista para la diversión!



ATTITUDE

Junior

Manual



// A RODAR! El sistema de cambios integrado de 8 velocidades ofrece un rendimiento excepcional en todos los terrenos. Con freno contrapedal para un frenado más suave.



// EMPUÑADURAS HORIZONTALES

La disposición horizontal de las empuñaduras es ideal para los niños ya que se adapta mejor a la forma ergonómica de sus brazos.



// ASA ERGONÓMICA

El asa ergonómica, en combinación con las ruedas de apoyo, permite el manejo de la handbike con una sola mano para separarla o guardarla fácilmente.



// FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Muy fácil de accionar y con sistema de bloqueo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATTITUDE JUNIOR // Handbike Manual infantil para silla de ruedas

Peso máx. usuario	100 kg
Para sillas de ancho* (ajust. + 2 cm)	26 a 46 cm
Peso anclajes de la silla	170 g
Peso total	14,5 kg
Ruedas	16"
Mandos de cambio	Grip shift
Velocidades	Buje con cambio integrado de 8 velocidades

Anchura bielas en V	24 cm
Longitud bielas en V	11 cm / 13 cm / 15 cm
Ajuste en profundidad de las bielas	10 cm
Ajuste en ángulo de las bielas	0° a 28°
Freno	Freno contrapedal
Freno de estacionamiento	Si
Colores	31

* Ancho de la silla medida de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Rev.1- Agosto 2017

